



## Dozuoto aerosolio inhaliatoriai:

### Kaip teisingai naudoti dozuotą suspausto oro aerosolio inhaliatorių?

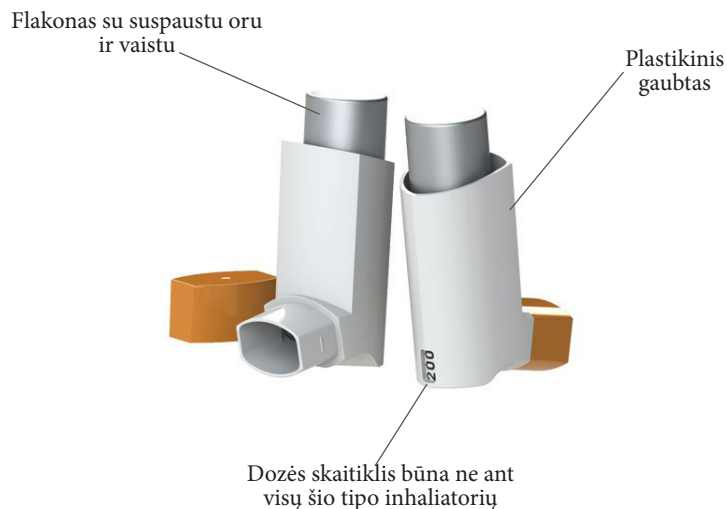

Jei įmanoma, naudodamiesi inhaliatoriumi stovėkite arba tiesiai sėdėkite.

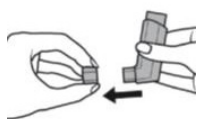


- 1) Nuo kandiklio **nuimamas apsauginis dangtelis** ir patikrinama, ar kandiklis švarus, ar jame nėra dulkių, purvo, svetimkūnių.



- 2) Kiek įmanoma lėčiau ir giliau iškvepiama (ne į inhaliatorių).



- 3) Talpyklė laikoma vertikaliai (korpusas turi būti nukreiptas į viršų), **kandiklis glaudžiai apspaudžiamas lūpomis**.

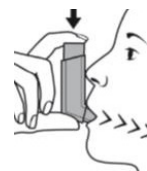

- 4) Tuo pat metu **lėtai ir giliai įkvepiama** per burną. **Pradėjus įkvėpimą, inhaliatoriaus viršūnė stipriai spaudžiama žemyn**, kad įvyktų vienas išpurškimas.



- 5) **Įkvėpus oras sulaikomas kiek įmanoma ilgiau**, tada inhaliatoriaus **kandiklis ištraukiamas iš burnos ir lėtai iškvepiama**. Negalima iškvėpti į inhaliatorių.



Jei reikalingas dar vienas išpurškimas, inhaliatorius toliau laikomas vertikaliai, palaukiama maždaug pusę minutės ir vėl pakartojami 2–5 punktuose išvardyti veiksmai.

**Svarbu.** 2–5 punktuose išvardytų veiksmų negalima atlikti per greitai.

Po vaisto sukvėpavimo reikia uždėti apsauginį dangtelį ir, jei yra, patikrinti dozės skaitiklį. Jei tinkamai įkvėpėte, skaitiklio skaičius sumažės.

Įkvėpus vaisto dozę, praskalaukite burną, dantis, gerklę vandeniu ir išspjaukite.


## Kaip tinkamai naudoti Rapihaler®?

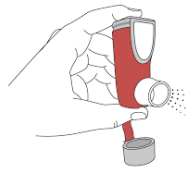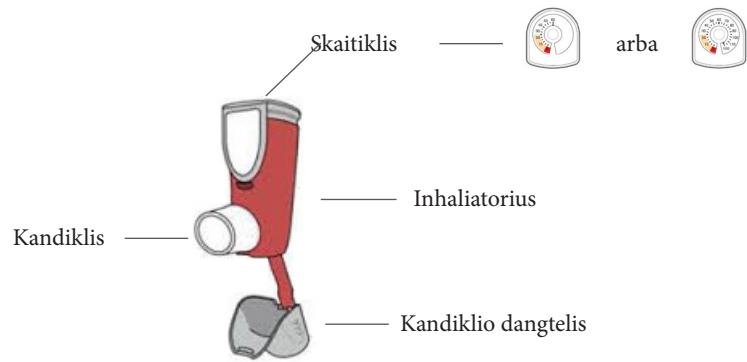

### 1) Prieš naudojimą inhaliatorių reikia paruošti, jei:

- naudosite pirmą kartą;
- nenaudojote inhaliatoriaus ilgiau kaip 7 dienas;
- inhaliatorius buvo nukritęs.

**Gerai pakratykite inhaliatorių bent 5 sek.**, kad susimaišytų aerozolio turinys.

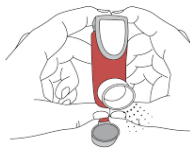

**Nuimkite kandiklio dangtelį**, švelniai paspausdami į randelius panašius iškilimus jo šonuose. Ant kandiklio esantis raištis liks pritvirtintas prie inhaliatoriaus.

**Laikydami inhaliatorių vertikaliai, paspauskite jo viršuje esantį skaitiklį, kad vaisto išsipurkštų į orą.**

Galite tai daryti viena arba abiem rankomis.

**Patraukite pirštą arba pirštus nuo skaitiklio. Palaukę 10 sek., gerai pakratykite inhaliatorių ir dar kartą laikydami inhaliatorių vertikaliai, paspauskite jo viršuje esantį skaitiklį, kad vaisto išsipurkštų į orą.**

Dabar inhaliatorius paruoštas naudoti.



### 2) Kaskart, kai reikia įkvėpti vaisto, laikykitės šių nurodymų:

1. **Gerai pakratykite inhaliatorių bent 5 sek.**, kad susimaišytų aerozolio turinys.
2. **Nuimkite kandiklio dangtelį** paspausdami į randelius panašius iškilimus jo šonuose. Patikrinkite, ar kandiklis neužsikimšęs. Laikydami inhaliatorių vertikaliai (viena arba abiem rankomis), švelniai iškvėpkite.
3. Įsidėkite kandiklį tarp dantų ir sučiaupkite lūpas.
4. **Pradėkite lėtą ir gilų įkvėpimą per burną. Stipriai nuspauskite inhaliatoriaus viršuje esantį skaitiklį**, kad būtų išpurkšta vaisto dozė. **Nuspaukę skaitiklį, dar truputį pratęskite įkvėpimą.** Įkvėpimas ir skaitiklio nuspaudimas vienu metu užtikrina vaisto patekimą į plaučius.
5. **Sulaikykite įkvėptą orą** maždaug 10 sek. arba kol nėra diskomforto.
6. **Prieš iškvėpdami nuimkite pirštą arba pirštus nuo skaitiklio ir ištraukite inhaliatorių iš burnos. Laikykite inhaliatorių vertikaliai.**
7. **Lėtai iškvėpkite.** Norėdami dar kartą įkvėpti vaisto, gerai pakratykite inhaliatorių bent 5 sek. ir pakartokite 3–7 veiksmus.
8. Uždėkite dangtelį atgal ant kandiklio.
9. Įkvėpę visą reikalingą vaisto dozę, praskalaukite burną vandeniu ir jį išspjaukite.



Dozių skaitiklis inhaliatoriaus viršuje rodo, kiek jame liko išpurškimų. Kai inhaliatorius pilnas, rodyklė rodo 60 arba 120.

Vaisto įkvėpus arba išpurškus į orą, rodyklės rodomas skaičius kaskart sumažėja (artėja link nulio).

Rodyklei pasiekus geltoną sritį, būna likę maždaug 20 išpurškimų.

Rodyklei pasiekus „0“, inhaliatoriaus daugiau naudoti negalima, nors gali atrodyti, kad inhaliatorius dar nėra tuščias ir veikia. Vis dėlto naudojant jį toliau reikiama vaisto dozė į kvėpavimo takus nebepatektų.

## Kaip tinkamai naudoti Respimat® inhaliatorių?



1) **Pasukimas.** Dangtelio nenumauti, sukti skaidrų pagrindą etiketėje esančių rodyklių kryptimi tol, kol trakstelės (pusė apsisukimo).



2) **Atidarymas.** Dangtelį mauti tol, kol trakstelės, tuomet jis bus visiškai numautas.



3) **Paspaudimas.** Lėtai visiškai iškvėpti, tada lūpomis apspausti kandiklį, neuždengiant orloidės. Nukreipti inhaliatorių į ryklę.

Pradėti lėtai, **giliai įkvėpti per burną, paspausti dozės išpurškimo mygtuką ir lėtą įkvėpimą tęsti toliau tiek, kiek patogiu. Sulaikyti kvėpavimą 10 sek.** arba tiek, kiek patogiu.

**Užmauti dangtelį.** Užmautas dangtelis turi likti tol, kol vėl prireiks inhaliatorių panaudoti.

Siekiant įkvėpti du išpurškimus (visą dozę), reikia pakartoti pasukimo, atidarymo ir paspaudimo veiksmus.

Įkvėpus vaisto dozę, praskalaukite burną, dantis, gerklę vandeniu ir išspjaukite.

## Kaip paruošti naują Respimat® inhaliatorių pirmam naudojimui:



1) **Skaidraus pagrindo nuėmimas.** Dangtelio nenumauti. Spausti apsauginę skląstį, kol kita ranka numaunamas skaidrus pagrindas.



2) **Užtaiso įdėjimas.** Įstumti užtaisą į inhaliatorių. Tvirtu paviršiumi užtaisą stumti stipriai į vietą tol, kol trakstelės.



3) **Užtaiso žymėjimas.** Pažymėti inhaliatoriaus užtaisų skaitiklio etiketės langelį, kad būtų galima stebėti, kiek užtaisų sunaudota. Skaidrų pagrindą stumti atgal į vietą tol, kol trakstelės.



4) **Pasukimas.** Dangtelio nenumauti. Sukti skaidrų pagrindą etiketėje esančių rodyklių kryptimi tol, kol trakstelės (pusė apsisukimo).



5) **Atidarymas.** Dangtelį atlenkti iki trakstelėjimo.



6) **Paspaudimas.** Nukreipti inhaliatorių į grindis. Paspaušti dozės išpurškimo mygtuką. Užlenkti dangtelį. Kartoti 4–6 punktuose nurodytus veiksmus, kol atsiras debesėlis. Po to, kai atsiras debesėlis, dar tris kartus pakartoti 4–6 punktuose nurodytus veiksmus.




### Kaip pakeisti užtaisą?

Pasukti skaidrų pagrindą, kad užtaisas atsilaisvintų. Iš inhaliatoriaus ištraukti užtaisą. Įstumti naują užtaisą, uždėti skaidrų pagrindą, kol trakstelės (tęsti veiksmus, nurodytus dalyje „Kaip paruošti naują Respimat® inhaliatorių pirmam naudojimui“ skyriuje, pradedant nuo 2 punkto).

## Aerozolio inhaliatorių naudojimas su tarpine

Tarpinė gali būti naudojama tik su suspausto oro inhaliatoriais.

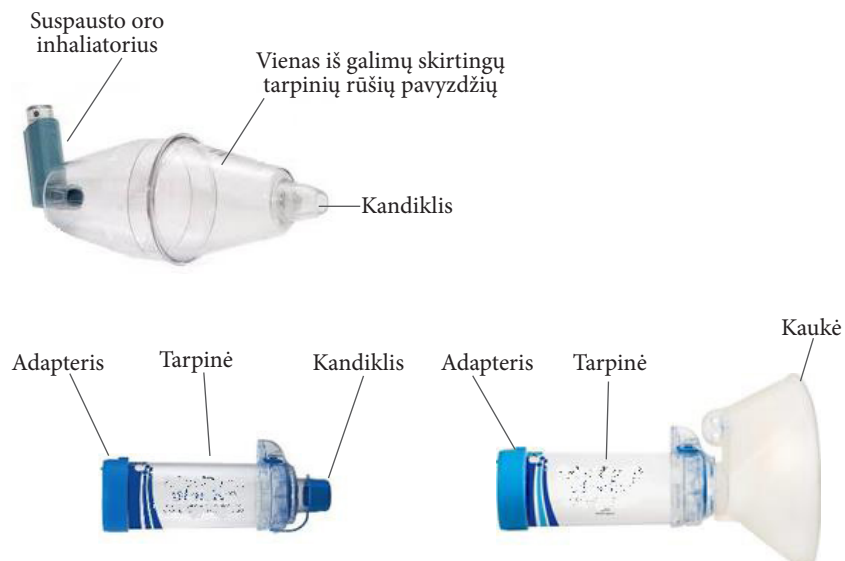

Tarpinė padeda veiksmingiau panaudoti inhaliatorių, užtikrina didesnę vaisto kiekio patekimą į plaučius, kur vaistas ir veikia, bei sumažina vaisto patekimą į burną, kur kartais vaistas gali sukelti nepageidaujamą poveikį.

Tarpinė dažniausiai naudojama kai sunku tuo pat metu paspausti inhaliatorių ir įkvėpti vaisto (dėl nepakankamos veiksmų koordinacijos) ar kai reikia įkvėpti didesnes vaisto dozes.

Tarpinė gali būti naudojama dviem būdais:

- daugkartinio kvėpavimo principu;
- vieno įkvėpimo principu.


## Daugkartinio kvėpavimo principas:

1) **Surinkite tarpinę** (jei reikia). Surinkimo procesas labai paprastas – tiesiog sujungti dvi dalis viena su kita.

2) **Nuimkite inhaliatoriaus dangtelį.**



3) Laikykite **inhaliatorių** vertikaliai ir **gerai suplakite**.

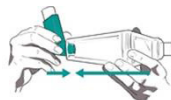

4) Įstatykite inhaliatorių vertikaliai į tam skirtą tarpinės angą.



5) Švelniai **iškvėpkite**. Tarpinės kandiklį įdėkite į burną ir lūpomis glaudžiai apspauskite.



6) Laikykite tarpinę horizontaliai ir **vieną kartą tvirtai nuspauskite vieną inhaliatoriaus papurškimą**.



7) **Įkvėpkite įprastai tris arba keturis įkvėpimus**.



8) **Išimkite tarpinės kandiklį iš burnos** ir švelniai **iškvėpkite**.

Išimkite inhaliatorių iš tarpinės.

Jei reikia daugiau nei vienos dozės, pakartokite visus veiksmus nuo 3 žingsnio. Uždėkite inhaliatoriaus dangtelį.


## Vieno įkvėpimo principas:

1) **Surinkite tarpinę** (jei reikia). Surinkimo procesas labai paprastas – tiesiog sujungti dvi dalis viena su kita.

2) **Nuimkite inhaliatoriaus dangtelį.**



3) Laikykite **inhaliatorių** vertikaliai ir **gerai suplakite**.

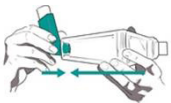

4) **Išstatykite inhaliatorių vertikaliai į tam skirtą tarpinės angą.**



5) Švelniai **iškvėpkite**. Tarpinės kandiklį įdėkite į burną ir lūpomis glaudžiai apspauskite.



6) Laikykite tarpinę horizontaliai ir **vieną kartą tvirtai nuspauskite vieną inhaliatoriaus papurškimą.**



7) **Įkvėpkite** lėtai ir giliai. **Sulaikykite kvėpavimą** maždaug 5 sek. arba tiek, kiek patogu.



8) **Sulaikę kvėpavimą išimkite tarpinės kandiklį iš burnos ir švelniai iškvėpkite.**

Jei reikia daugiau nei vienos dozės, pakartokite visus veiksmus nuo 3 žingsnio. Uždėkite inhaliatoriaus dangtelį.


**Svarbu!** Išvalykite tarpinę prieš naudodami pirmą kartą, tada maždaug kartą per mėnesį.

Valymui naudokite šiltą vandenį su virtuvėje naudojamais detergentais, leiskite išdžiūti ore neišskalaudami. Džiovinimas audiniu arba popieriniu rankšluosčiu gali sukelti elektrosstatinį krūvį tarpinės viduje, dėl kurio vaistai „prilimpa“ prie šonų. Prieš naudojimą kandiklį nuvalykite.

## Dozuotų miltelių inhaliatoriai

Dozuotų miltelių inhaliatoriai pateikiami abėcėlės tvarka.

### Kaip tinkamai naudoti Breezhaler®?

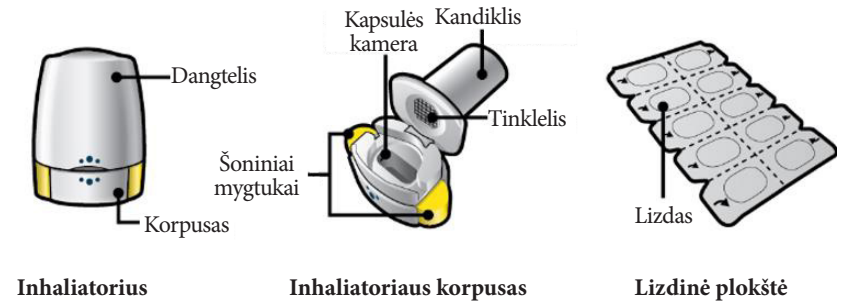

Inhaliatorius

Inhaliatoriaus korpusas


Lizdinė plokštė



1) **Nuimkite dangtelį.**



2) **Atidarykite inhaliatorių.**

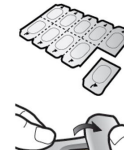

3) **Išimkite kapsulę.**

Plėsdami pagal perforuotą liniją atskirkite vieną lizdą nuo lizdinės plokštelės. Nuplėškite apsauginę plėvelę ir išimkite kapsulę.

Nespauskite kapsulės per foliją.

Kapsulės negalima nuryti.



4) **Įdėkite kapsulę.**

Niekada nedėkite kapsulės tiesiai į kandiklį.



5) **Uždarykite inhaliatorių.**



6) **Pradurkite kapsulę vieną kartą.**

Inhaliatorių laikykite statmenai. Kapsulę pradurkite tuo pat metu stipriai spausdami abu šonuose esančius mygtukus. Kai kapsulė bus pradurta, Jūs išgirsite garsą.

Kapsulę pradurkite tik vieną kartą.



7) **Atleiskite šoninius mygtukus.**



8) **Visiškai iškvėpkite.**

Nepūskite į inhaliatorių.



9) **Giliai įkvėpkite vaisto.**


Inhaliatorių laikykite taip, kaip parodyta paveiksle. Kandiklį įsikiškite į burną ir tvirtai apspauskite jį lūpomis. Nespauskite šoninių mygtukų. Įkvėpkite greitai ir kiek įmanoma giliau. Įkvepiant girdėsite dūzgimo garsą.

Kai įkvėpsite, galite pajusti vaisto skonį.



10) **Sulaikykite kvėpavimą**


Sulaikykite kvėpavimą mažiausiai 5 sek.

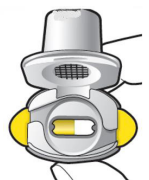

11) **Patikrinkite, ar kapsulė tuščia**

Atidarykite inhaliatorių ir pažiūrėkite, ar kapsulėje neliko miltelių. Jei kapsulėje liko miltelių, uždarykite inhaliatorių.

Pakartokite žingsnius nuo 8 iki 10.

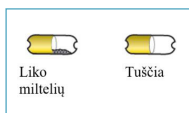

12) **Išimkite tuščią kapsulę**

Išmeskite tuščią kapsulę į šiukšlių dėžę. Uždarykite inhaliatorių ir uždėkite dangtelį.

**Svarbu!** Kapsulės visada turi būti laikomos lizdinėje plokštelėje ir jas reikia išimti tik prieš pat naudojimą. Išimant kapsulę iš lizdinės plokštelės, nespauskite jos per foliją.

Įkvėpus vaisto dozę, praskalaukite burną, dantis, gerklę vandeniu ir išspjaukite.

## Kaip tinkamai naudoti Diskus™?




1) **Laikykite išorinį dėklą viena ranka. Įstatykite kitos rankos nykštį į nykščio laikiklį. Stumkite išorinį dėklą nuo savęs, kol jis spragtelės.**



2) **Stumkite svirtį nuo savęs, kol ji spragtelės.** Kiekvieno spragtelėjimo metu vaistų dozė patenka į specialią talpą inhaliatoriuje, iš kurios bus įkvėpta, todėl be reikalo šios svirties nestumdykite.



3) **Iškvėpkite** laikydami inhaliatorių toliau nuo burnos (ne į inhaliatorių).

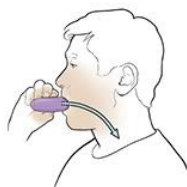

4) **Įdėkite kandiklį į burną ir apspauskite glaudžiai lūpomis.** Įkvėpkite tolygiai ir giliai per burną, o ne per nosį.



5) **Sulaikykite kvėpavimą** ir išimkite kandiklį iš burnos, toliau būkite sulaikę kvėpavimą (10 sek. arba tiek, kiek patogu).




6) **Lėtai ir ramiai iškvėpkite.**



7) **Uždarykite inhaliatorių** stumdami išorinį korpusą į save.

Įkvėpus vaisto dozę, praskalaukite burną, dantis, gerklę vandeniu ir išspjaukite.

## Kaip tinkamai naudoti Easyhaler®?

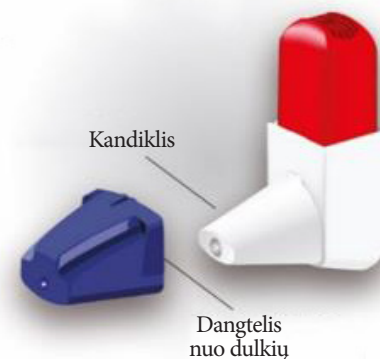

1) **Nuimkite dangtelį** nuo dulkių. Laikydami inhaliatorių vertikaliai, **pakratykite jį 3–5 kartus**. Jeigu kratydami inhaliatorių netyčia paspaudėte, ištuštinkite miltelius iš kandiklio, kaip aprašyta toliau.



2) Laikykite inhaliatorių vertikaliai suėmę smiliumi ir nykščiu. **Spalvotą mygtuką spauskite žemyn**, kol išgirsite spragtelėjimą, leiskite inhaliatoriui vėl spragtelėti atgal. Taip vaisto dozė paruošiama įkvėpti.

### Svarbu:

- Inhaliatorius nespargtels, jeigu nebus nuimtas dangtelis nuo dulkių.
- Spauskite žemyn tik vieną kartą.
- Jei netyčia paspaudėte daugiau nei vieną kartą, ištuštinkite miltelius iš kandiklio, kaip aprašyta toliau.
- Paspauskite inhaliatorių prieš įkvėpdami, o ne tuo pačiu metu.
- Spausdami ir įkvėpdami vaisto dozę, inhaliatorių laikykite vertikaliai. Pakreipus inhaliatorių, milteliai gali išblyrėti jų dar nespėjus įkvėpti.



3) Laikykite inhaliatorių vertikaliai. Iškvėpkite įprastai. **Įdėkite kandiklį į burną** tarp dantų ir tvirtai apspauskite kandiklį lūpomis. **Stipriai ir giliai įkvėpkite.** Ištraukite inhaliatorių iš burnos, **sulaikykite kvėpavimą** apie 10 sek. arba tiek, kiek pavyksta pagal būklę, **tada iškvėpkite** įprastai.


**Svarbu:**

- Įsitinkite, kad visas kandiklis yra burnoje.
- Neiškvėpkite į inhaliatorių. Tai svarbu, nes gali užkimšti inhaliatorių. Jei iškvėpėte į inhaliatorių, išimkite miltelius iš kandiklio. Kaip tai atlikti, skaitykite žemiau.

Jei reikia kitos inhaliacijos, pakartokite 1–3 žingsnius.

Panaudojus inhaliatorių, uždėkite dangtelį nuo dulkių ant kandiklio. Tai apsaugos inhaliatorių nuo atsitiktinio paspaudimo.

Įkvėpus vaisto dozę, praskalaukite burną, dantis, gerklę vandeniu ir išspjaukite.

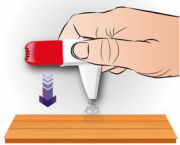

Jei atsitiktinai paspaudėte inhaliatorių arba jei jį paspaudėte daugiau nei vieną kartą, arba jei iškvėpėte atgal į inhaliatorių, ištuštinkite kandiklį.

Kad ištuštintumėte miltelius, pastuksenkite kandiklį į stalą arba delną. Tada pradėkite iš naujo atlikdami visus tris aukščiau išvardytus žingsnius.

Naudodami inhaliatorių galite naudoti apsauginį dėklą. Tai pagerina prietaiso patvarumą. Kai pirmą kartą įdėsite inhaliatorių į apsauginį dėklą, įsitinkite, kad ant inhaliatoriaus uždėtas dangtelis nuo dulkių, nes tai apsaugos inhaliatorių nuo atsitiktinio paspaudimo. Jūs galite naudoti inhaliatorių neišimdami jo iš apsauginio dėklo.

Vadovaukitės tomis pačiomis instrukcijomis, kaip nurodyta anksčiau aprašytuose 1–3 žingsniuose.

**Svarbu:**


- spausdami inhaliatorių laikykite jį vertikaliai;
- įkvėpę vaisto dozę, uždėkite dangtelį nuo dulkių.



- Dozių skaitiklis rodo likusių dozių skaičių. Skaitiklio rodmuo pasikeičia kas penkis paspaudimus. Kai dozių skaitiklis tampa raudonas, tai reiškia, kad liko 20 dozių.

Jeigu naudojate apsauginį dėklą, galite įdėti į jį ir naują inhaliatorių.


**Kaip tinkamai naudoti Ellipta®?**

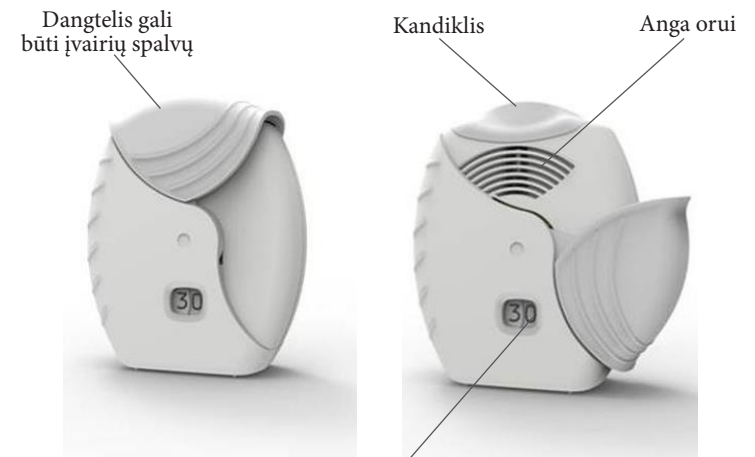

Dozės skaitiklis yra ne ant visų šio tipo inhaliatorių



1) **Stumkite dangtelį žemyn**, kol pasigirs spragtelėjimas.

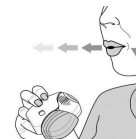

2) **Iškvėpkite** (toliau nuo inhaliatoriaus).





3) Įdėkite kandiklį į burną.



4) Lūpomis glaudžiai apspauskite kandiklį. Neuždenkite oro išleidimo angos pirštais. Įkvėpkite tolygiai ir giliai. Kai giliai įkvėpsite, **sulaikykite kvėpavimą** ir **išimkite iš burnos kandiklį**.




5) Sulaikę kvėpavimą laikykite 5 sek. arba tiek, kiek patogu. Po to švelniai iškvėpkite (toliau nuo inhaliatoriaus).




6) Užstumkite dangtelį.

Įkvėpus vaisto dozę, praskalaukite burną, dantis, gerklę vandeniu ir išspjaukite.

### Kaip tinkamai naudoti Nexthaler®?

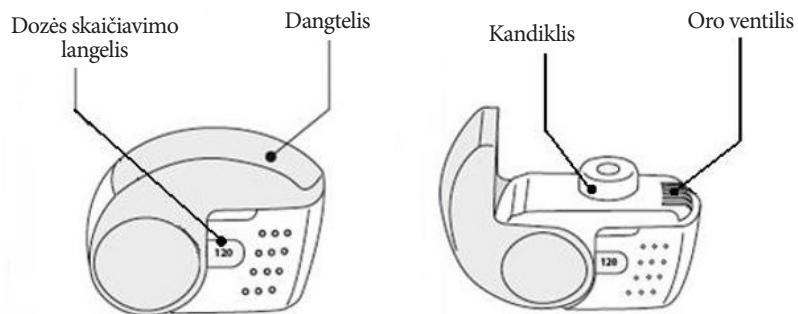


1) Tvirtai laikykite inhaliatorių vertikaliaje padėtyje.

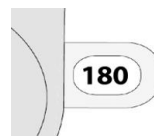

2) Patikrinkite likusių dozių skaičių: bet koks skaičius nuo „1“ iki „180“ rodo, kiek liko dozių.

○ Jei dozių skaičiavimo langelyje rodomas „0“, vadinasi dozių neliko.

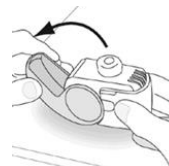

3) Iki galo atidarykite dangtelį.

4) Prieš įkvėpimą **iškvėpkite** tiek giliai, kiek Jums patogu. Negalima iškvėpti per inhaliatorių.




5) **Apžiokite inhaliatoriaus kandiklį** ir glaudžiai lūpomis apspauskite. Laikydami inhaliatorių, neuždenkite oro ventilio.

6) **Greitai ir giliai įkvėpkite** per burną. Neįkvėpkite per oro ventilį.

Dozės įkvėpimo metu galite pajusti tam tikrą skonį.


Dozės įkvėpimo metu galite išgirsti arba pajusti spragtelėjimą.

Negalima įkvėpti per nosį. Įkvėpimo metu inhaliatoriaus negalima atitraukti nuo lūpų.

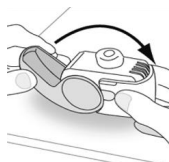

7) **Sulaikę įkvėpimą, išimkite inhaliatoriaus kandiklį** iš burnos ir toliau **laikykite sulaikytą kvėpavimą 5–10 sek.** (arba kiek Jums patogu). **Lėtai iškvėpkite.**

Negalima iškvėpti per inhaliatorių.

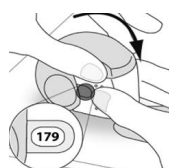


8) **Grąžinkite inhaliatorių į vertikalią padėtį ir iki galo uždarykite dangtelį.**

9) Patikrinkite, ar dozės skaičiavimo langelyje esantis skaičius sumažėjo vienetu.

Jei reikia įkvėpti dar vieną dozę, pakartokite 1–9 veiksmus.

Įkvėpus vaisto dozę, praskalaukite burną, dantis, gerklę vandeniu ir išspjaukite.

## Kaip tinkamai naudoti Turbuhaler®?

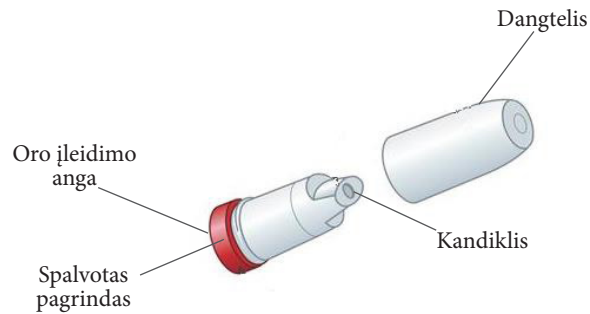


- 1) **Atsukite inhaliatoriaus dangtelį** prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite.



- 2) Laikykite inhaliatorių vertikaliai. Norint paruošti inhaliatorių vaistų įkvėpimui, pirmiausiai **pasukite spalvotą prietaiso pagrindą iki galo į dešinę. Tada pasukite jį atgal į kairę, kol spragtelės.** Dabar vaisto dozė paruošta įkvėpimui.



- 3) Švelniai **iškvėpkite** toliau nuo inhaliatoriaus. Laikykite prietaisą neuždengdami oro įleidimo angų.

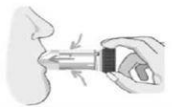

- 4) Įdėkite kandiklį į burną ir glaudžiai lūpomis apspauskite. **Greitai ir giliai įkvėpkite per burną, sulaikykite kvėpavimą 5–10 sek.**




- 5) **Išimkite inhaliatorių iš burnos ir iškvėpkite.**




- 6) **Uždėkite dangtelį ir užsukite.**

Įkvėpus vaisto dozę, praskalaukite burną, dantis, gerklę vandeniu ir išspjaukite.

## Kaip tinkamai naudoti Aerolizer®?

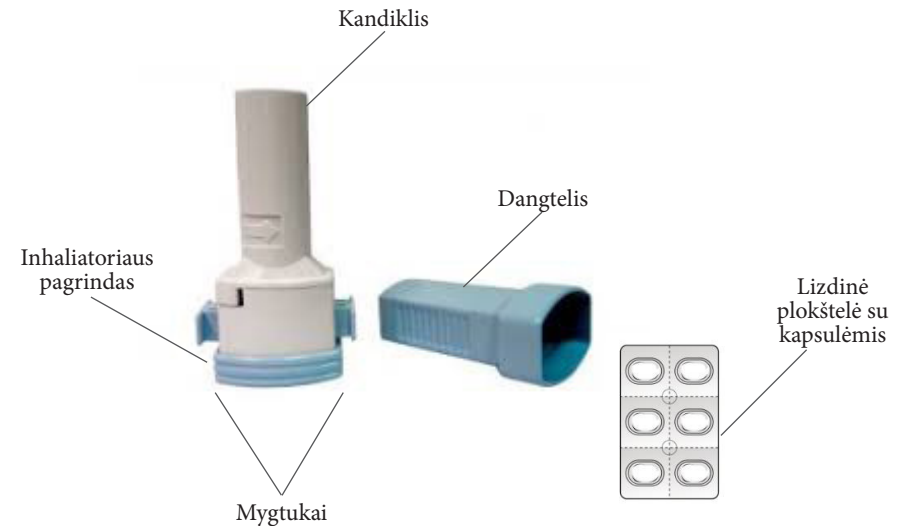

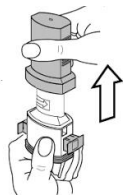

1) Nuimkite dangtelį nuo inhaliatoriaus.




2) Laikydami Aerolizer® pagrindą, atidarykite kandiklį rodyklės kryptimi.



3) Įsitinkinkite, kad Jūsų pirštai visiškai sausi. Kapsulę išimkite iš folijos paketėlio prieš pat vartojimą ir padėkite ją tiksliai ant kapsulės kameros dugno.



4) Uždarykite kapsulės kamerą sukdami kandiklį atgal tol, kol išgirsite spragtelėjimą.

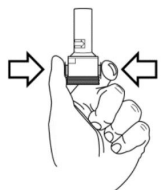


5) Laikykite inhaliatorių vertikaliai. Kapsulę pradurkite tuo pat metu stipriai spausdami abu šonuose esančius mygtukus. Kai kapsulė bus pradurta, Jūs išgirsite garsą. Atleiskite šoninius mygtukus. Kapsulę pradurti galima tik vieną kartą.

**Svarbu!** Po šio veiksmo kapsulė gali sutrupėti ir mažų želatinos dalelių gali patekti į burną arba gerklę. Želatina yra valgoma, todėl nekenksminga.



6) Visiškai iškvėpkite toliau nuo inhaliatoriaus.

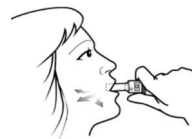

7) Kandiklį įdėkite į burną ir lūpomis glaudžiai apspauskite. Šiek tiek atloškite galvą. **Greitai, bet tolygiai ir kiek įmanoma giliau įkvėpkite.**


**Svarbu!** Jūs turite išgirsti dūzgimą, nes kapsulė sukasi virš jos kameros esančioje ertmėje. Jei šio garso neišgirdote, atverkite kapsulės kamerą ir patikrinkite, ar kapsulė laisvai guli kameroje. Po to pakartokite 6–7 veiksmus.

Pakartotinai kapsulės pradurti NEREIKIA.



8) Įkvėpę per inhaliatorių, **sulaikykite kvėpavimą** kol patogiu ir ištraukite Aerolizer® iš burnos. Po to per nosį iškvėpkite. **Atverkite kapsulės kamerą ir patikrinkite, ar kapsulėje neliko miltelių.** Jei jų liko, kartokite 6–8 veiksmus.

9) Suvartoję visus miltelius, atverkite kapsulės kamerą (kaip nurodyta antrame punkte). **Išimkite tuščią kapsulę** ir sausu audiniu arba minkštu šepetėliu pašalinkite inhaliatoriaus viduje esančius miltelių likučius.

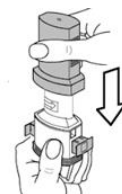

10) Uždenkite inhaliatorių dangteliu.

Įkvėpus vaisto dozę, praskalaukite burną, dantis, gerklę vandeniu ir išspjaukite.